



HARNISCH+RIETH

Serviceanleitung

Austausch des Magnetventilkernes Plunger mit Teflondichtung "N"

Artikel Nr. 63243

Dampfstrahlgeräte

DE



Harnisch+Rieth GmbH & Co.KG

Küferstraße 14-16; D – 73650 Winterbach

Tel. +49 (0) 7181/9678-0

Fax +49 (0) 7181/9678-17

E-Mail: service@hr-dental.de

WhatsApp-Service: +49 (0)171 499 1538 

Ersatzteillisten finden Sie unter:
www.hr-dental.de/service


Diese Anleitung beschreibt den Austausch des Magnetventilkerns (Plunger f. Nass und Trockendampfventil) für folgende Dampfstrahlgeräte:

A-S 80

D-S 100

D-S 100 A

HINWEIS: Netzstecker vom Netz trennen

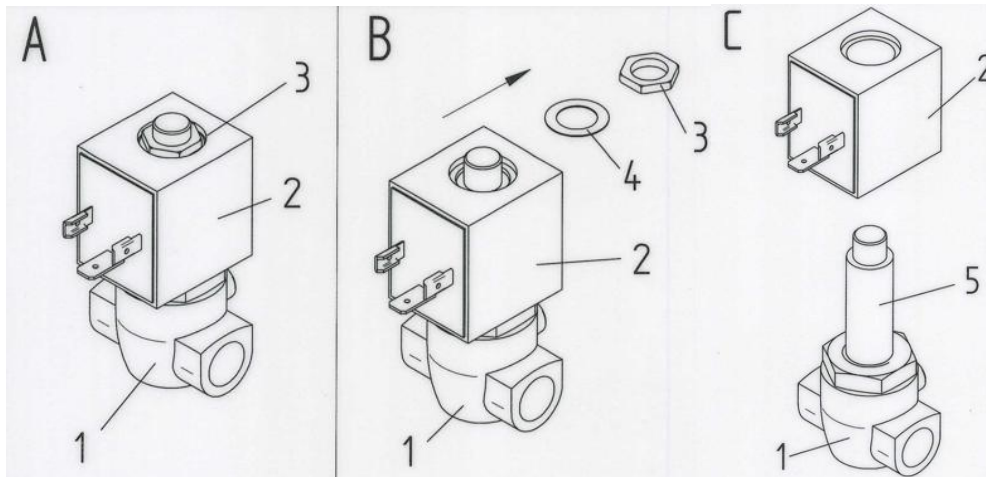

1. Nach dem Lösen der Mutter SW14 (3) Scheibe (4) und Magnetventilspule (2) abnehmen
2. Kern-Führungsgehäuse (5) vom Messinggehäuse (1) abschrauben.
3. Den im Kern-Führungsgehäuse (5) befindlichen Kern (Plunger) mit Feder gegen den neu gelieferten Kern (Plunger) mit Feder auswechseln.

Achtung: Aus Messinggehäuse (1) – Innenraum siehe (Abb.D) bitte vorher alle Fremdpartikel mit feinem Schleifvlies entfernen und ggf. ausblasen.

